

Clearblue är mer än 99% säkert från den dagen som du förväntar din menstruation. Clearblue kan användas upp till 4 dagar före förväntad menstruation. Läs bruksanvisningen noga innan du utför testet.

1 Utföra testet

Om du utför testet från och med dagen för förväntad menstruation, kan testet utföras när som helst under dagen.


Testar du tidigt ska morgonurin användas.

- När du ska utföra testet tar du ut teststickan ur folieomslaget och tar av den blå hylsan. Använd teststickan med en gång.

Testa i urinen

Du kan antingen testa direkt i urinstrålen eller i ett urinprov som du har samlat i ett rent och torrt kärl.

- Håll uppsugningsdelen med spetsen nedåt i urinstrålen, **eller** håll uppsugningsdelen i urinprovet (se bilden) i **endast 5 sekunder**.
- Uppsugningsdelen färgas snabbt rosa för att visa att urin absorberas. **Du måste fortsätta att hålla uppsugningsdelen i urinen i 5 sekunder.**
- Fortsätt hålla uppsugningsdelen med spetsen nedåt eller lägg teststickan plant tills det syns ett streck i Kontrollfönstret.
- Sätt tillbaka hylsan om du vill.

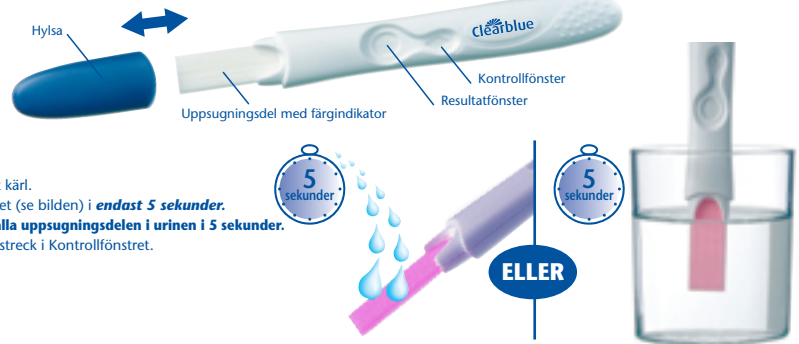


Se F5 i Frågor & Svar om uppsugningsdelen inte färgas rosa helt och hållet.

2 Vänta 2 minuter

- Ett blått streck i Kontrollfönstret visar att testet har fungerat.
- Resultatet kan avläsas efter **2 minuter**.
- Avläs inte resultatet förrän detta blå streck syns.**
- Om det inte syns något blått streck i Kontrollfönstret inom **10 minuter** har inte testet fungerat. (Se F6 i Frågor & Svar).

VIKTIGT! Avläs resultatet inom **10 minuter** efter att du har utfört testet. Bortse från eventuella förändringar i resultatet efter detta.

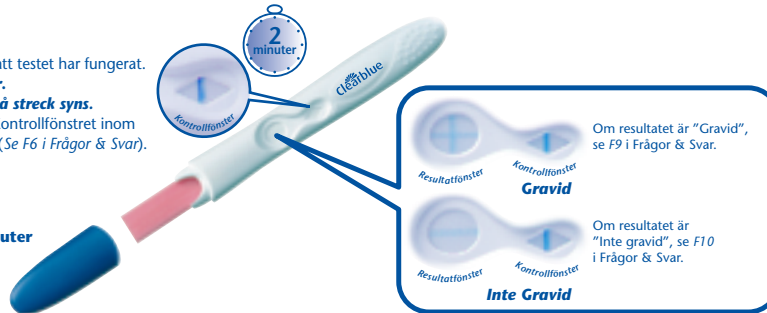

3 Avläs resultatet

Nu kan du avläsa resultatet i Resultatfönstret.

Det har ingen betydelse om någon del av plusstecknet (+) är svagare eller starkare, resultatet är ändå "Gravid".

Bild A



Bild B



Bild C



Om du fortfarande är osäker på resultatet, läs igenom F7 i Frågor & Svar för mer information.

Frågor & Svar – Läs gärna nedan, där de vanligaste frågorna besvaras.

Frågor och svar

1 Hur pålitligt är Clearblue?

Laboratorietester har visat att Clearblue är mer än 99% säkert när det används från och med dagen för förväntad menstruation.

2 Hur fungerar Clearblue?

När du är gravid producerar kroppen hormonet hCG (humant choriongonadotropin). Mängden hCG i kroppen ökar i ett tidigt skede av graviditeten. Clearblue kan registrera små mängder av detta hormon i ditt urin.

3 När kan jag testa med Clearblue?

Clearblue kan användas upp till 4 dagar före förväntad menstruation. Om du utför testet före förväntad menstruation och får ett "Inte Gravid" resultat finns det fortfarande en möjlighet att du är gravid. I tabellen nedan finns resultaten från de kliniska studierna av tidig testning med Clearblue.

Testa Tidigt

Clearblue rekommenderar att du testar från och med den dagen du förväntar din menstruation. Mängden graviditetshormon ökar snabbt under den tidiga graviditeten och Clearblue kan användas upp till 4 dagar före förväntad menstruation. I kliniska studier med tidiga graviditetsprover gav Clearblue följande resultat:

Antal dagar före förväntad menstruation	% av proverna från gravida kvinnor som gav "Gravid" resultat
-1	87%
-2	84%
-3	74%
-4	53%

För att ta reda på när du ska ha mens måste du först beräkna hur lång din cykel vanligtvis är. Det gör du genom att räkna antalet dagar från första dagen i menstruationen till dagen innan nästa menstruation börjar.

- Om du har oregelbundna cykler, ska du utgå från din längsta cykel under de senaste månaderna innan du utför testet.
- Om du inte vet när du ska få din menstruation rekommenderar vi att du utför testet tidigast 19 dagar efter senaste gången du hade oskyddat samlag.
- Om du använder testet från och med dagen för förväntad menstruation, kan testet utföras närsomhelst under dagen. Vid tidigt test ska morgonurin användas. Undvik att dricka mycket innan du testar.
- Om resultatet är "Inte Gravid" men du fortfarande misstänker att du är gravid, se fråga 10.

4 Kan läkemedel eller sjukdom påverka resultatet?

- Läs alltid tillverkarens anvisningar för läkemedel du tar innan du utför testet.
- Hormonpreparat som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. (Dessa preparat ges vanligtvis som injektioner och om du testar för tidigt efter en sådan injektion kan testresultatet bli felaktigt "Gravid".)
- Annan hormonbehandling som innehåller klomifen, värktabletter och hormonella preventivmedel (t ex p-piller) påverkar inte resultatet.
- Om du nyligen har slutat med hormonella preventivmedel eller använder hormonpreparat som innehåller klomifen, kan dina menstruationer vara oregelbundna, vilket kan medföra att du testar för tidigt.
- Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten av något skäl avbröts), kan testresultatet bli felaktigt "Gravid".
- Utömlivshandavskap, äggstockscystor, klimakteriet och vissa ovanliga sjukdomar kan ge missvisande resultat.
- Om du får ett "Gravid" resultat är det möjligt att du senare upptäcker att du inte är gravid på grund av naturligt avbruten graviditet som kan inträffa under det tidiga skedet.

Om resultatet inte blir det förväntade bör du rådfråga din barnmorska eller gynekolog.

5 Jag har använt graviditetstestet, men uppsugningsdelen har inte blivit helt rosa. Vad gör jag?

Om uppsugningsdelen inte färgas rosa helt och hållet kanske den inte har fuktats med en tillräcklig mängd urin. Men om det syns ett blått streck i Kontrollfönstret inom 10 minuter efter att du har utfört testet, så har testet fungerat. Om det inte syns något blått streck i Kontrollfönstret inom 10 minuter, se fråga 6.

6 Jag har använt graviditetstestet, men det visas inte något blått streck i Kontrollfönstret. Vad gör jag?

Om det inte syns något blått streck i Kontrollfönstret inom 10 minuter efter att du har utfört testet så har inte testet fungerat. Det kan bero på:

- Uppsugningsdelen hölls inte nedåt eller teststickan lades inte plant när den hade fuktats med urin.
- För mycket eller för lite urin användes. Uppsugningsdelen ska hållas i urinen i 5 sekunder.

Läs anvisningarna en gång till och gör om testet med en ny teststicka. Om du vill kan du samla urin i ett rent, torrt kärl och hålla uppsugningsdelen i urinen i endast 5 sekunder.

7 Vad betyder resultatet?

- För att resultatet ska vara "Gravid" måste det visas ett blått streck i Kontrollfönstret och ett plusstecken (+) i Resultatfönstret inom 10 minuter efter att du har utfört testet.

Utseendet på plusstecknet (+) i Resultatfönstret kan variera, däremot ska strecken som bildar plusstecknet (+) och strecket i kontrollfönstret ha liknande tjocklek (se bilderna A-C ovan).

Bild A

Det här är ett vanligt resultat om du är gravid och du utför testet mer än ett par dagar efter förväntad menstruation, eftersom hCG-nivån då är högre.

Bild B

Det här resultatet är inte ovanligt om du är gravid och du testar på samma dag som förväntad menstruation, eller dagarna däromkring, eftersom hCG-nivån då är ganska låg.

Bild C

Även det här resultatet är "Gravid".

Om du fortfarande är osäker på resultatet bör du vänta i minst 3 dagar innan du testar på nytt. Följ anvisningarna noga.

- Vid ett "Inte Gravid" resultat visas ett blått streck i kontrollfönstret och ett minustecken (-) i Resultatfönstret inom 10 minuter efter utfört test. Om resultatet är "Inte Gravid" men du fortfarande misstänker att du är gravid, se fråga 10.

8 Hur länge är resultatet giltigt?

Resultatet kan avläsas när som helst inom 10 minuter. Efter 10 minuter ska du bortse från eventuella förändringar av resultatet.

9 Testet visar att jag är gravid. Vad gör jag?

Om testet visar att du är gravid bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

10 Testet visar att jag inte är gravid. Vad gör jag?

Du är kanske inte gravid, nivåerna på graviditetshormonerna är kanske ännu inte tillräckligt höga för att ge utslag eller du kan ha misstagat dig på datumet för nästa menstruation.

- Om du utförde testet för tidigt gör du om testet när du förväntar din menstruation.
- Om menssen är försenad, testa på nytt efter 3 dagar. Om detta test visar "Inte Gravid" och du fortfarande inte har fått din mens bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog.

Clearblue produktrådgivning - Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan 09.00 till 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.

0771-79 00 00

Samtalet kostar som ett lokalsamtal och kan variera beroende på operatör. Kontrollera med din operatör för exakta avgifter.

Vänligen ha ditt LOT-nummer **LOT** tillgängligt. Samtal kan spelas in för utbildning och kvalitetskontroll.

För ytterligare information kan du besöka vår hemsida;

www.clearblue.info

Enheten är avsedd för hemmabruk.

Förvaras i rumstemperatur.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Endast för in vitro-diagnostik. **IVD**

För engångsbruk.

Kastas i hushållsoporna.

Ska inte användas om folieomslaget är skadat.

Ska inte användas om förbrukningsdatumet är passerat.

